

KneeKG APP⁺ MC

KneeKG APP⁺ MC

MODE D'EMPLOI

CONTENU

TABLE DES MATIÈRES

I. MODE D'EMPLOI	3
II. INTRODUCTION	3
III. COMMENT TRANSFÉRER LES DONNÉES D'UN PATIENT VERS LE PORTAIL KNEEKG APP+.....	4
IV. CONNEXION AU KNEEKG APP+	5
V. CONNEXION	5
VI. RÉINITIALISER LE MOT DE PASSE	5
VII. A2F (AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS).....	5
1 KNEEKG APP+	7
1.1 PAGE « PATIENTS »	7
1.2. ONGLET « CONSULTATIONS » DU PATIENT	10
1.2.1. APERÇU.....	10
1.2.3. RAPPORTS EN ATTENTE	22
1.2.4. RETOUR À L'ONGLET « CONSULTATIONS »	22
1.3. ONGLET « RAPPORTS ET FICHIERS » DU PATIENT	23
1.3.1. FUSIONNER ET TÉLÉCHARGER DES FICHIERS.....	23
1.3.2. IMPORTER DES FICHIERS	25
2 PARAMÈTRES DE L'UTILISATEUR	26
2.1 MODIFIER/METTRE À JOUR VOS INFORMATIONS.....	26
2.2 CHANGER DE MOT DE PASSE	26

I. MODE D'EMPLOI



IMPORTANT

Veillez lire ce guide dans son intégralité avant d'utiliser l'application web KneeKG APP+. Une attention particulière doit être accordée aux consignes de sécurité. Recherchez le symbole suivant tout au long de ce guide.

L'application web KneeKG APP+ est un outil complémentaire au système KneeKG® principal qui permet aux cliniciens de consulter en ligne les données de la genougraphie des patients et de générer les rapports. Il est important de suivre les instructions pour assurer la qualité des rapports et des recommandations.

II. INTRODUCTION

KneeKG APP+ est une application web utilisant les données du système KneeKG® 2.0. Elle simplifie la génération des rapports de consultation obtenus à partir des données de la genougraphie et permet au clinicien de les consulter immédiatement après une évaluation avec l'appareil médical KneeKG®. De plus, cette application web permet aux cliniciens d'importer et d'exporter divers documents pertinents à la génération d'un rapport de consultation. Cette application web permet aux cliniciens d'accéder rapidement à des explications cliniques valides et à une interprétation (base de données en ligne) des dysfonctionnements mécaniques du genou détectés par le système KneeKG® 2.0. Il permet également aux cliniciens d'accéder à des options thérapeutiques potentielles et à des sites d'exercices spécialisés.

Le but de ce document est de donner aux utilisateurs de KneeKG APP+ une présentation de cette application web et d'améliorer la compréhension de ses fonctionnalités pour optimiser la génération de rapports de haute qualité.

KneeKG APP+ est destinée à être utilisée dans la génération des rapports de consultation, incluant les suggestions d'options thérapeutiques. Cette application web contient :

- Un générateur de rapports de consultation en ligne pour vous aider
 - À faire des recommandations personnalisées pour les programmes d'exercices ainsi que pour les orthèses de genou, les genouillères et les orthèses plantaires. Ces exercices sont sélectionnés à partir d'une base de données d'exercices en ligne par le spécialiste de la santé qui générera le rapport final.
- Un générateur en ligne des rapports des marqueurs biomécaniques généraux et ceux en lien avec l'arthrose (OA)
- Un rapport de triage en ligne lié à la pertinence pour le patient d'une consultation orthopédique pour une arthroplastie du genou
- Une vue des graphiques de profils cinématiques 3D du système KneeKG®

⚠ IMPORTANT

Cette application web ne propose ou ne modifie sous aucune circonstance les résultats obtenus des patients. Pour toutes les fonctionnalités nécessitant ces résultats, ceux-ci sont utilisés tels que reçus par le système KneeKG®.


Le système KneeKG® fournit des informations essentielles au professionnel de la santé pour l'assister dans sa prise de décision clinique et pour établir un bon plan de traitement pour le patient. Cependant, le professionnel doit tout de même prendre en considération d'autres informations cliniques et résultats pour prendre une décision finale et poser un diagnostic selon ce que lui indique sa formation médicale et son jugement.

Toutes les informations de santé des patients sont stockées sur des serveurs sécurisés qui répondent aux normes de protection des données sensibles.

III. COMMENT TRANSFÉRER LES DONNÉES D'UN PATIENT VERS KNEEKG APP+

Dans le logiciel Knee3D Clinical-Info du système KneeKG®, vous pouvez rechercher et retrouver le patient pour lequel vous voulez que les données soient disponibles dans le KneeKG APP+. À partir du logiciel Knee3D Clinical-Info, vous pouvez lancer le logiciel Knee3D Analysis et sélectionner la consultation et l'acquisition pour lesquelles vous voulez générer les courbes du patient.

Appuyez sur le bouton de sauvegarde et validez toutes les informations du patient présentes dans la fenêtre (prénom, nom de famille, sexe assigné à la naissance, date de naissance, etc.). Puis, cliquez sur « Send Report » (photo ci-dessous) pour enregistrer les données dans la base de données Cloud de KneeKG APP+ et ainsi pouvoir les utiliser.

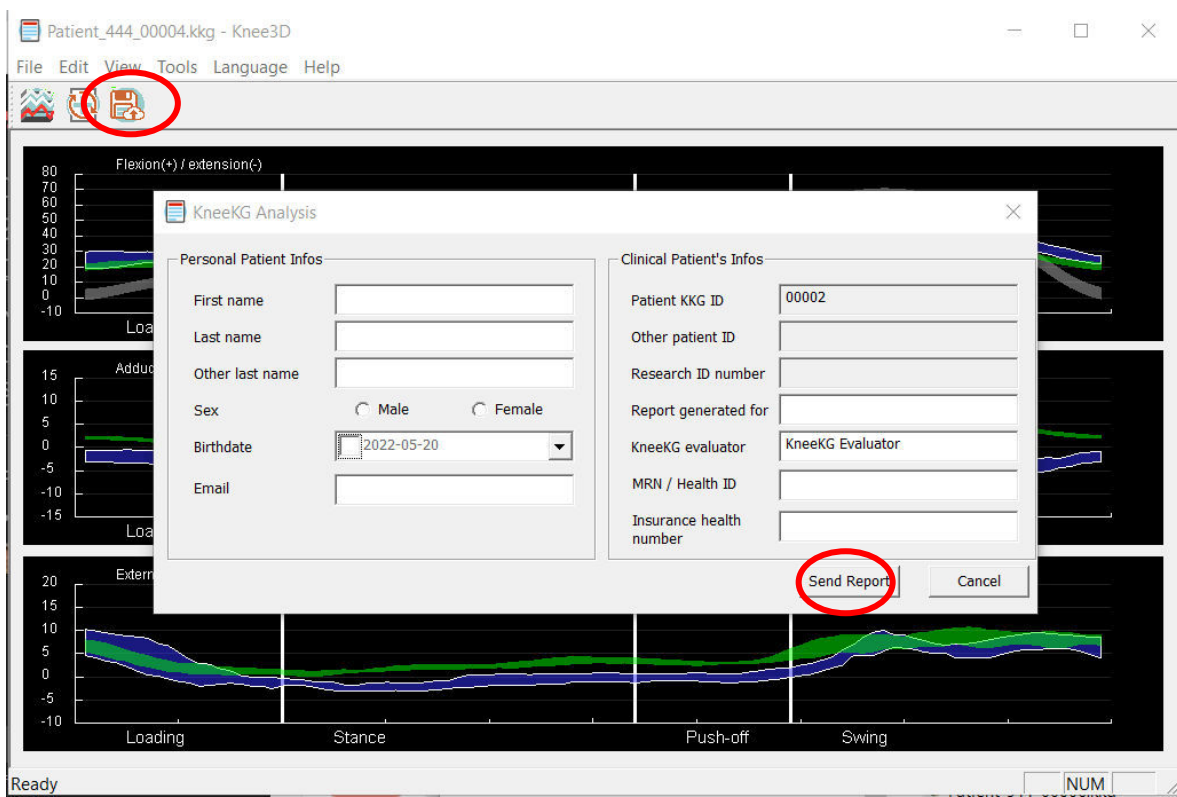


IV. CONNEXION À KNEEKG APP+

V. Connexion

Pour accéder à KneeKG APP+, vous devez avoir les informations d'identification appropriées. Utilisez l'identifiant et le mot de passe qui vous ont été fournis lors de votre formation pour accéder au portail client d'Emovi. Si nécessaire, référez-vous à votre administrateur pour avoir l'identifiant et le mot de passe associés à votre portail. (Notez que les informations d'identification requises sont les mêmes que celles utilisées pour vous connecter au logiciel Knee3D Clinical-Info sur votre ordinateur.)

Visitez: <https://app.emovi.ca>, sélectionnez votre pays et entrez vos informations d'identification pour vous connecter.

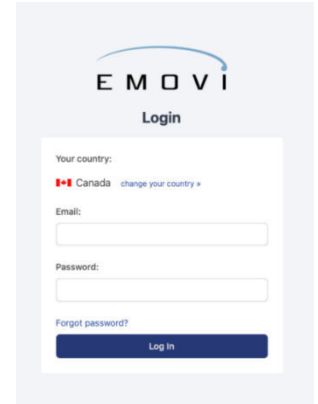The screenshot shows the Emovi Login interface. At the top is the Emovi logo. Below it is the word "Login". There is a section for "Your country:" with a dropdown menu currently showing "Canada" and a link to "change your country". Below this are two input fields: "Email:" and "Password:". At the bottom of the form is a link for "Forgot password?" and a blue "Log In" button.

VI. Réinitialiser le mot de passe


Si une réinitialisation du mot de passe est requise, cliquez sur le bouton « Forgot password? » pour être redirigé vers la page servant à récupérer le mot de passe. Utilisez votre adresse courriel associée à KneeKG APP+ et au logiciel Knee3D Clinical-Info pour recevoir un lien pour réinitialiser votre mot de passe. Une fois votre adresse courriel fournie, cliquez sur le bouton « Envoyer le lien de réinitialisation de mot de passe ».

Si nécessaire, référez-vous à votre administrateur pour avoir l'adresse courriel associée à votre compte KneeKG APP+.



VII. A2F (Authentification à deux facteurs)

L'**A2F** (Authentification à deux facteurs) peut être activée à la demande de votre clinique.

Si cela est le cas,

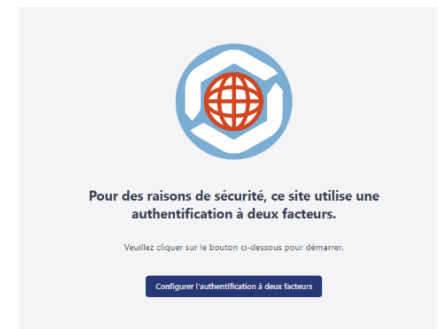


- À la **première connexion**, vous devez cliquer sur « **Configurer l'authentification à deux facteurs** ».
 - Avec une **application d'authentification sur votre téléphone intelligent** (Microsoft Authenticator, Google Authenticator, ...), cliquez sur « + » pour ajouter un nouveau service.
 - Ensuite, vous pouvez scanner le code QR affiché sur votre portail client Emovi pour lier celui-ci à votre application d'authentification.
- **Remarque :** Si vous ne pouvez pas scanner le code QR, vous pouvez plutôt entrer le code manuellement. Ce code se trouve sur la même page que le code QR.

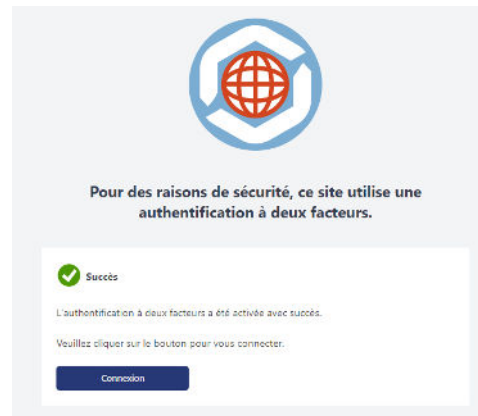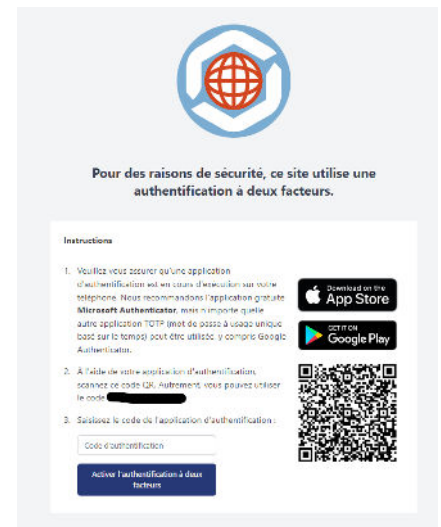


- **Pour les connexions futures :**
 - Vous devriez voir une page où vous devez entrer un code à 6 chiffres pour vous connecter.

Une fois que votre identifiant et votre mot de passe sont inscrits, cliquez sur le bouton « Connexion ». Vous accéderez alors à votre portail.

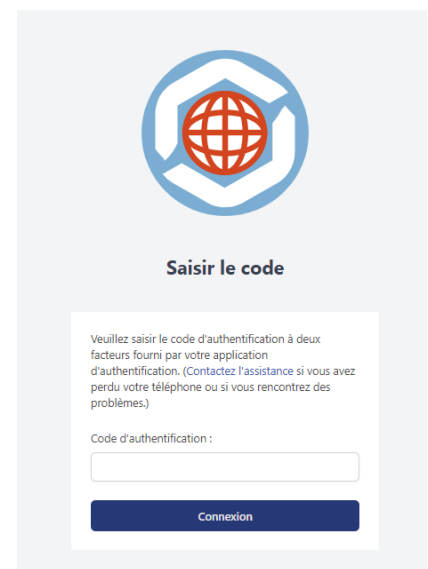

1 KNEEKG APP+

Pour accéder à l'application web KneeKG APP+, cliquez sur le lien « KneeKG APP+ » situé à gauche ou au centre de la page (voir ci-dessous).

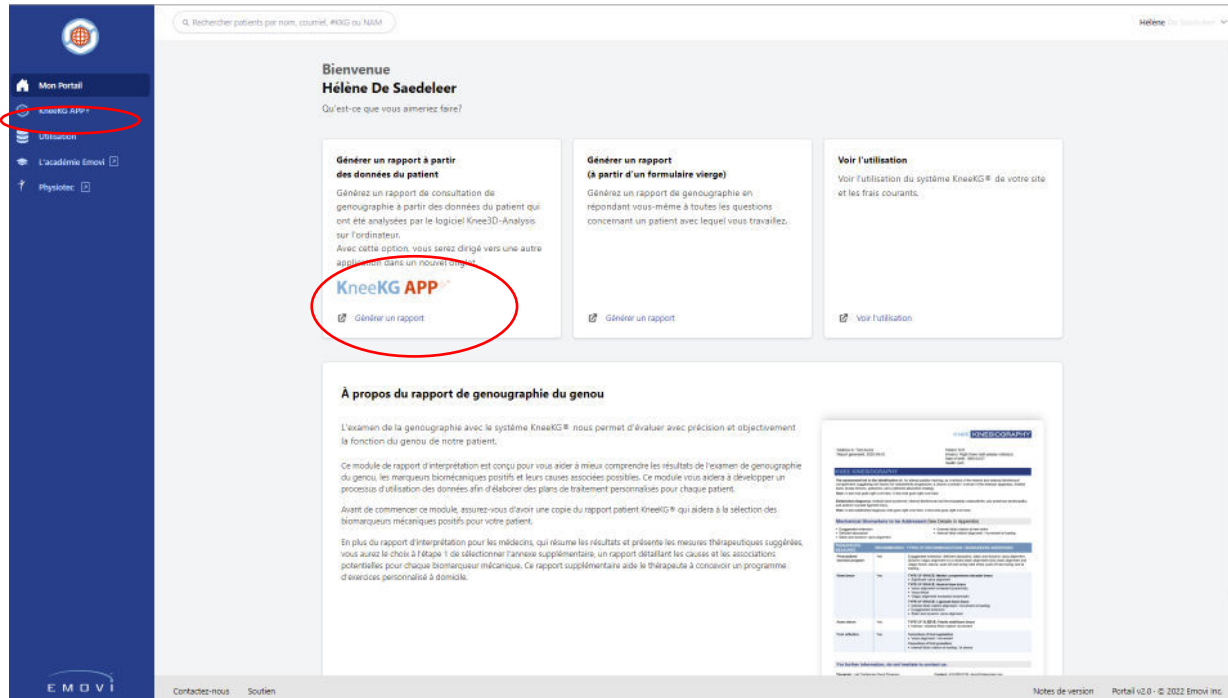

Bienvenue
Hélène De Saedeleer
Qui est-ce que vous aimeriez faire?

Générer un rapport à partir des données du patient
Générez un rapport de consultation de genougraphie à partir des données du patient qui ont été analysées par le logiciel Knee3D-Analysys sur l'ordinateur.
Avec cette option, vous serez dirigé vers une autre application sans un nouveau login.

Générer un rapport (à partir d'un formulaire vierge)
Générez un rapport de genougraphie en répondant vous-même à toutes les questions concernant un patient avec lequel vous travaillez.


Voir l'utilisation
Voir l'utilisation du système KneeKG® de votre site et les frais courants.

KneeKG APP+
Générer un rapport

À propos du rapport de genougraphie du genou
L'examen de la genougraphie avec le système KneeKG® nous permet d'évaluer avec précision et objectivement la fonction du genou de notre patient.
Ce module de rapport d'interprétation est conçu pour vous aider à mieux comprendre les résultats de l'examen de genougraphie du genou, les marqueurs biomécaniques positifs et leurs causes associées possibles. Ce module vous aidera à développer un processus d'utilisation des données afin d'élaborer des plans de traitement personnalisés pour chaque patient.
Avant de commencer ce module, assurez-vous d'avoir une copie du rapport patient KneeKG® qui aidera à la sélection des marqueurs biomécaniques positifs pour votre patient.
En plus du rapport d'interprétation pour les médecins, qui résume les résultats et présente les mesures thérapeutiques suggérées, vous aurez le choix à l'étape 1 de sélectionner l'annexe supplémentaire, un rapport détaillant les causes et les associations potentielles pour chaque biomarqueur mécanique. Ce rapport supplémentaire aide le thérapeute à concevoir un programme d'exercices personnalisé à domicile.

1.1 PAGE « PATIENTS »

La page « Patients » est la page d'accueil de KneeKG APP+. Elle présente la liste des patients créés dans le logiciel Knee3D Clinical-Info sur le poste de travail de votre clinique.

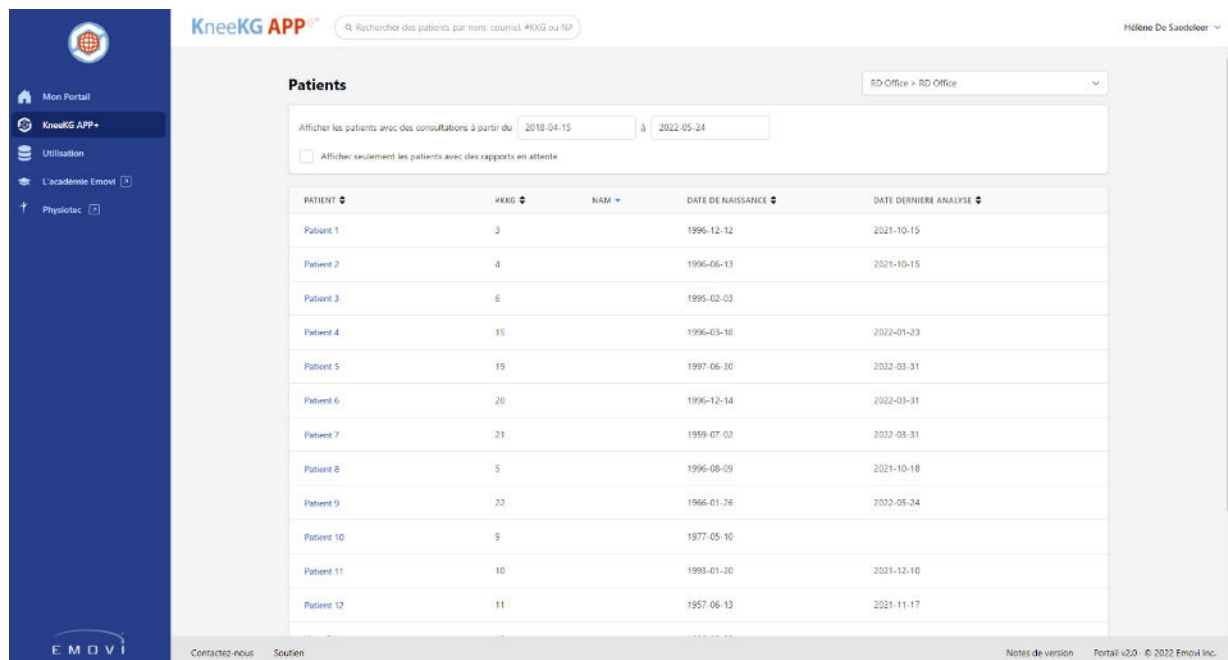

KneeKG APP+
Rechercher des patients par nom, courriel, #KKG ou NAM


Patients
RD Office > RD Office

Afficher les patients avec des consultations à partir du 2018-04-15 à 2022-05-24


☐ Afficher seulement les patients avec des rapports en attente

PATIENT	#KKG	NAM	DATE DE NAISSANCE	DATE DERNIERE ANALYSE
Patient 1	3		1996-12-12	2021-10-15
Patient 2	4		1996-06-13	2021-10-15
Patient 3	6		1995-02-03	
Patient 4	15		1996-03-10	2022-01-23
Patient 5	19		1997-06-30	2022-03-31
Patient 6	20		1996-12-14	2022-03-31
Patient 7	21		1959-07-02	2022-03-31
Patient 8	5		1996-08-09	2021-10-18
Patient 9	22		1966-01-28	2022-05-24
Patient 10	9		1977-05-10	
Patient 11	10		1993-01-20	2021-12-10
Patient 12	11		1957-06-13	2021-11-17


Si votre clinique contient plusieurs postes de travail KneeKG, ou si vous êtes lié à plusieurs cliniques, vous verrez un menu déroulant près du coin supérieur droit de la page à l'aide duquel vous pourrez choisir la clinique et/ou le poste de travail pour lequel vous voulez voir les patients. La première clinique et le premier poste de travail seront sélectionnés par défaut.

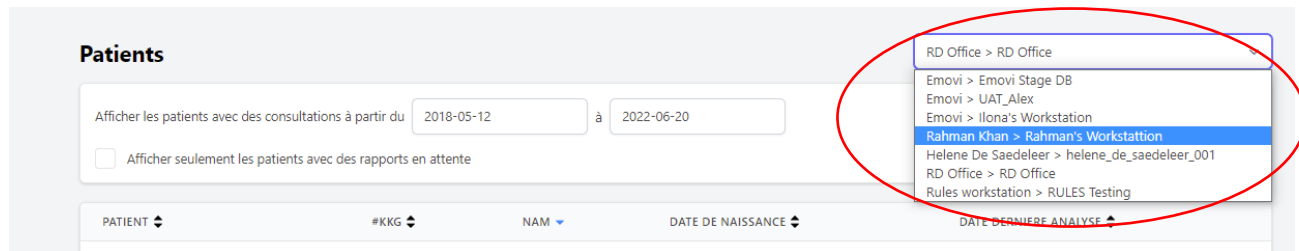

Si vous êtes lié à un seul site et poste de travail, la liste déroulante n'apparaîtra pas.

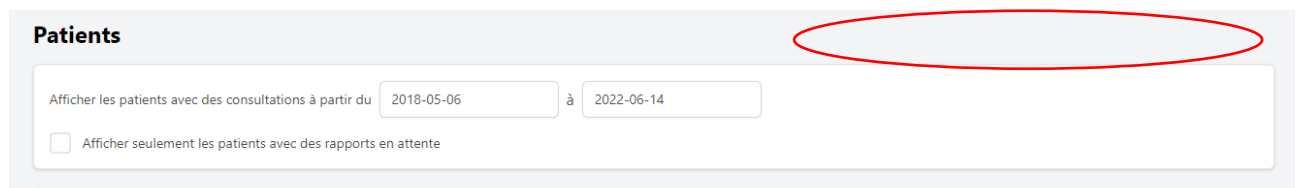

En haut de chaque page de KneeKG APP+, il y a un champ de recherche global à l'aide duquel vous pouvez rechercher instantanément des patients dans le poste de travail sélectionné.

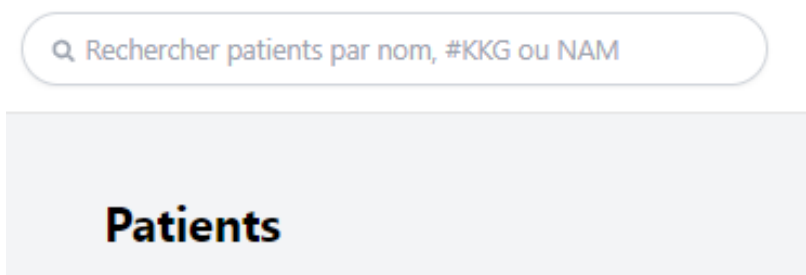

En haut de la page, vous pouvez filtrer la liste de patients par date de consultation. Par exemple, si vous souhaitez voir tous les patients ayant eu leur consultation entre le 1^{er} juin et le 31 juillet, vous pouvez entrer ces dates dans ces champs. Notez que l'analyse des résultats (avec Knee3D Analysis) devra également avoir eu lieu dans cet intervalle de temps pour y apparaître; autrement dit, si un patient a eu sa consultation, mais qu'aucune analyse n'a été fait, il n'apparaîtra pas dans les résultats.

Patients

Afficher les patients avec des consultations à partir du à

☐ Afficher seulement les patients avec des rapports en attente

PATIENT ↕	#KKG ↕	NAM ▼
Test 4.x	49	dfgsdgdf
Fab testsamdhack	48	asdfasdf
Zazu 2can	32	6

Jun 2022						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

En cliquant sur la case « Afficher seulement les patients avec des rapports en attente » (voir ci-dessous), vous ne verrez que les patients de la liste qui ont des rapports en attente. Consultez la section « [Rapports en attente](#) » de ce document pour plus d'informations sur cette particularité.

Patients

Emovi > UAT_

Afficher les patients avec des consultations à partir du à


☒ Afficher seulement les patients avec des rapports en attente

PATIENT ↕	#KKG ↕	NAM ↕	DATE DE NAISSANCE ▲	DATE DERNIE
test left	46	12345	1988-12-26	2021-12-15

1.2. ONGLET « CONSULTATIONS » DU PATIENT

1.2.1. Aperçu

En cliquant sur le nom d'un patient, vous accéderez à l'**onglet « Consultations »** de celui-ci. Cet onglet affiche toutes les consultations du patient pour lesquelles des analyses ont été effectuées. (Comme indiqué ci-dessus, cet onglet n'affiche que les consultations qui contiennent au moins une analyse.) Les consultations sont affichées dans l'ordre chronologique inverse, montrant alors la consultation la plus récente en premier.

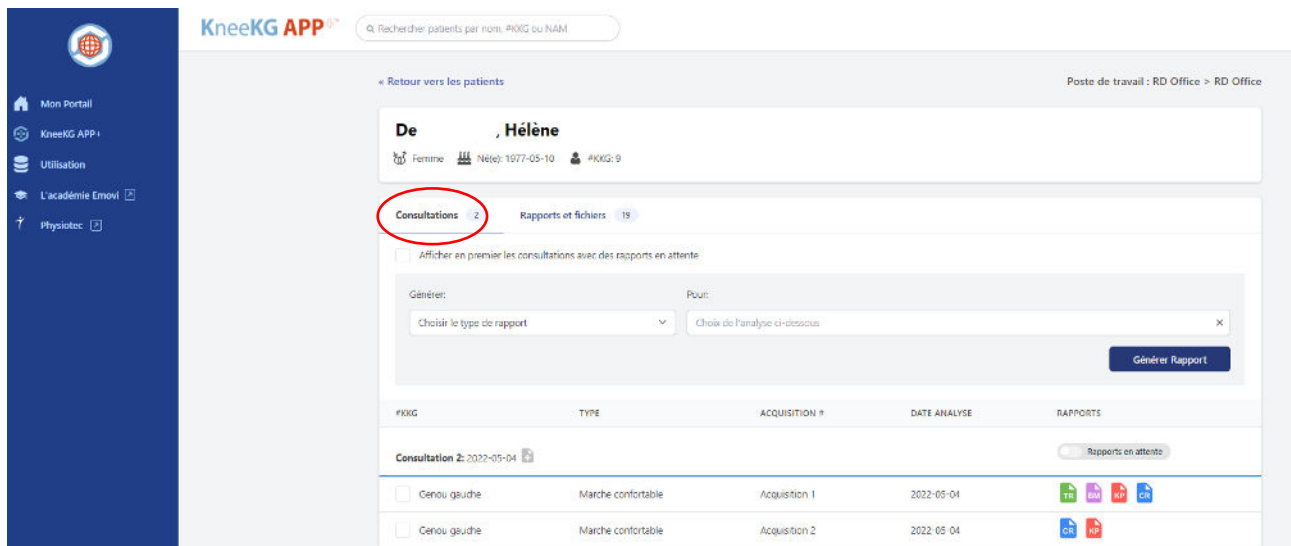

The screenshot shows the KneecG APP interface for a patient named Hélène. The page includes a sidebar with navigation options like 'Mon Portail', 'KneecG APP+', 'Utilisation', 'L'Académie EMOVI', and 'Physiotec'. The main content area displays patient information (Femme, Née le: 1977-05-10, #KKG: 9) and a list of consultations. The 'Consultations' tab is highlighted with a red circle. Below the patient information, there is a section for generating reports with dropdown menus for 'Générer:' (Choisir le type de rapport) and 'Pour:' (Choix de l'analyse ci-dessous), and a 'Générer Rapport' button. A table below shows consultation details with columns for #KKG, TYPE, ACQUISITION #, DATE ANALYSE, and RAPPORTS.

#KKG	TYPE	ACQUISITION #	DATE ANALYSE	RAPPORTS
Consultation 2: 2022-05-04				Rapports en attente
☐ Genou gauche	Marche confortable	Acquisition 1	2022-05-04	
☐ Genou gauche	Marche confortable	Acquisition 2	2022-05-04	

Les informations personnelles du patient et le poste de travail actuel sont indiqués au haut de la page. Le lien « Retour vers les patients » vous ramène à la page « Patients ».

Près du haut de l'onglet « Consultations » se trouve une case qui vous permet de répertorier toutes les consultations avec des rapports en attente au haut de la liste des consultations. De plus, chaque consultation a un bouton à bascule à l'aide duquel vous pouvez modifier le paramètre « Rapports en attente » appliqué automatiquement. Voir la section « [Rapports en attente](#) » de ce document pour plus d'informations.

Sous cette case se trouve une barre déroulante avec des options grâce auxquelles vous pouvez générer différents rapports. Nous expliquerons comment cela fonctionne dans la section suivante.



The screenshot shows the report generation section of the KneecG APP. The 'Générer:' dropdown menu is open, displaying a list of report types. The 'Rapport OA' option is highlighted with a red circle. The 'Pour:' field shows 'Genou gauche Marche confortable, Acquisition 1, 2022-05-04'. Below the dropdown, there is a table with columns for #KKG, ACQUISITION #, DATE ANALYSE, and RAPPORTS. The first row shows 'Consultation 2: 2022-05-04' with a 'Rapports en attente' status. The second row shows 'Genou gauche' with 'Marche confortable', 'Acquisition 1', and '2022-05-04', with report icons (TR, BM, KP, CR) in the 'RAPPORTS' column.

#KKG	ACQUISITION #	DATE ANALYSE	RAPPORTS
Consultation 2: 2022-05-04			Rapports en attente
☒ Genou gauche	Marche confortable	Acquisition 1	2022-05-04

À côté des acquisitions de chaque consultation se trouvent des icônes montrant les différents rapports qui ont été générés pour chacune des acquisitions. Vous pouvez ouvrir chaque rapport en cliquant sur son icône.

ACQUISITION #	DATE ANALYSE	RAPPORTS
<div>Rapports en attente</div>		
Acquisition 1	2022-05-04	<div>     </div>

Cliquez sur l'icône pour voir le rapport.

Remarque: Rapport dont le lien avec l'acquisition est incertain



Il est possible que vous voyiez un petit point d'interrogation rouge au-dessus de certaines icônes. Cela indique qu'il est possible que le rapport ne corresponde pas à l'acquisition de la consultation auquel il est lié. (En effet, dans la version précédente de KneeKG APP+, les documents n'étaient pas liés à des acquisitions mais plutôt à des consultations. Il peut donc y avoir une ambiguïté quant aux acquisitions auxquelles appartiennent certains anciens fichiers.) Désormais, les nouveaux documents générés dans le KneeKG APP+ seront liés à une seule acquisition et ne seront alors plus affichés avec un point d'interrogation rouge.

1.2.2. Génération de rapports

Pour générer un rapport, sélectionnez :

- Le type de rapport que vous désirez dans la bande déroulante « Générer »,
- Une ou deux analyses disponibles dans la liste de consultations.

Puis, cliquez sur le bouton « Générer Rapport » pour que le système valide vos choix et génère le rapport. (Notez qu'il n'est pas possible de générer tous les rapports dans tous les scénarios; par exemple, vous ne pouvez pas générer de rapport si vous sélectionnez trois analyses ou plus.)

Consultations 2

Rapports et fichiers 19

☐ Afficher en premier les consultations avec des rapports en attente

Générer:

Choisir le type de rapport

Choisir le type de rapport

Rapport de Consultation

Rapport OA

Rapport de triage pour arthroplastie

Rapport Marqueurs Biomécaniques

Rapport de profil cinématique

Pour:

Genou gauche Marche confortable, Acquisition 2, 2022-05-04

Générer Rapport

IKK	ACQUISITION #	DATE ANALYSE	RAPPORTS	
Consultation 2: 2022-05-04			Rapports en attente	
☐ Genou gauche	Marche confortable	Acquisition 1	2022-05-04	<div>     </div>
☒ Genou gauche	Marche confortable	Acquisition 2	2022-05-04	<div>   </div>


Les sous-sections suivantes décrivent tous les types de rapports pouvant être générés.

1.2.2.1. Rapport de consultation (CR)


Cette icône identifie un rapport de consultation.
(Consultation Report)



Lorsque vous choisissez de générer un rapport de consultation:

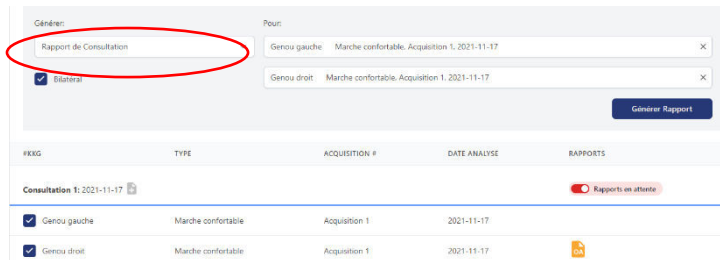

- La case « Bilatéral » apparaît sous le menu déroulant. Cochez cette case si vous voulez générer un rapport de consultation bilatérale – en d'autres mots, pour avoir une comparaison entre deux analyses, soit une pour chaque genou.
 - Note: Les deux analyses sélectionnées doivent être de la même consultation, ou de consultations différentes qui ont eu lieu dans un intervalle de 6 mois maximum, pour générer un rapport bilatéral. De plus, il n'est pas possible de générer un rapport bilatéral pour un même genou.
- Après avoir choisi de générer un rapport de consultation, vous serez guidé à travers un processus de six étapes qui vous permettra de valider les résultats de l'analyse et de configurer ce qui doit être affiché sur le rapport.

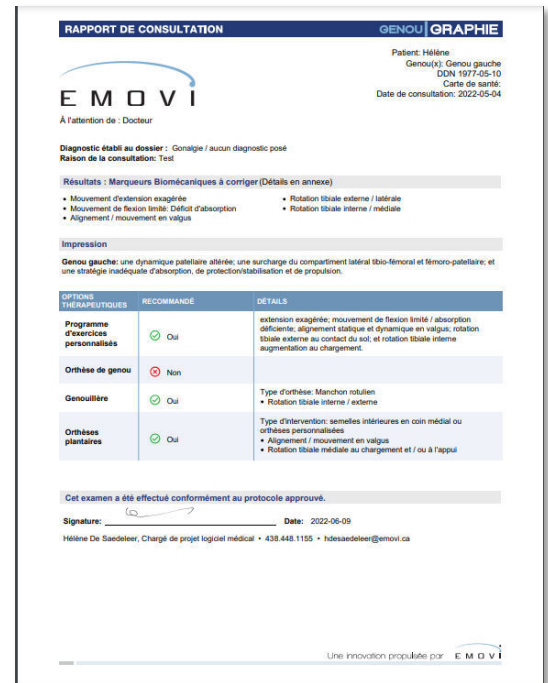

Le générateur en ligne de rapports de consultation est un outil facile et intuitif qui permet aux cliniciens de générer efficacement un rapport, et cela, dans un délai de temps raisonnable.

Le générateur de rapport en ligne a été conçu pour importer automatiquement les informations personnelles appropriées du patient et les données cinématiques du genou évalué afin que les dysfonctionnements biomécaniques du patient soient déjà sélectionnés.

Ceci permet au clinicien de valider rapidement le contenu du rapport, de faire les changements appropriés, si nécessaire, et de considérer d'autres informations qui peuvent avoir été collectées lors de d'autres évaluations connexes.

Pour compléter le rapport, le clinicien doit simplement cocher les cases appropriées dans les sections liées aux différents déficits biomécaniques.

Si le diagnostic a été indiqué dans le logiciel Clinical-Info avant de transmettre les données dans le portail, il est possible d'aller directement à l'étape 6 pour visualiser, confirmer et générer le rapport de consultation dans sa forme automatisée.

À tout moment, le clinicien peut laisser des notes dans les sections appropriées pour clarifier son interprétation.

La section suivante vous guidera étape par étape pour utiliser le générateur de rapports de consultation.

1. Informations générales du patient

- Indiquez à qui le report est destiné (champ obligatoire). Validez les informations personnelles et le côté du genou évalué avant d'aller à la section suivante.
- Vous pouvez choisir d'inclure une page résumée (pour les médecins) et/ou des explications détaillées en cochant les cases appropriées.



RAPPORT GENOU GRAPHIE

Ce module web vous permet de générer un rapport de consultation de la genougraphie et de le sauvegarder en format PDF. Compléter d'abord les champs demandés ci-dessous.

INFORMATION PATIENT

Nom du patient:

Date de naissance:

NAM:

Évaluation du genou:

☐ Avec orthèses portatives

PRÉFÉRENCES DE RAPPORT

Que doit inclure le rapport: ☒ Page de résumé (pour les médecins) ☒ Détails et explications des marqueurs biomécaniques

À l'attention de:

Professionnel de la santé:

Titre du poste:

Courriel:


Téléphone:

Suivant »

2. Confirmer le diagnostic établi du patient et la raison de la consultation

- Veuillez indiquer si un diagnostic a déjà été établi pour ce patient. Une case doit absolument être sélectionnée. **Si un diagnostic a été saisi dans le logiciel Knee3D Clinical-Info, dans l'onglet « Diagnostic », cette section devrait déjà être remplie.**
- Veuillez indiquer si besoin la raison de la consultation.

(**Note:** Si vous effectuez un rapport bilatéral des genoux, vous pouvez individualiser l'interprétation et les recommandations pour chacun des genoux. Soyez prudent en sélectionnant les bonnes informations pour le bon genou).

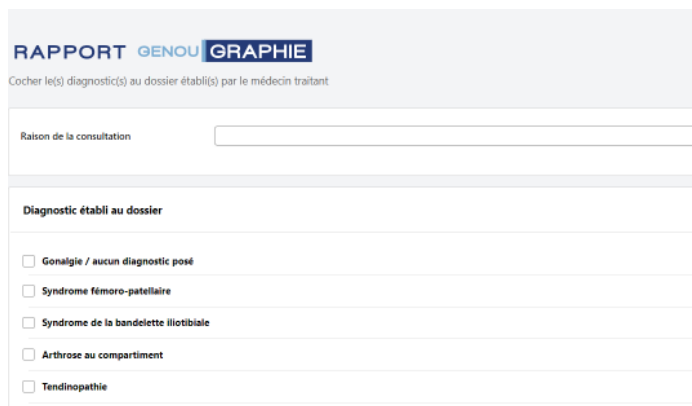

RAPPORT GENOU GRAPHIE

Cocher le(s) diagnostic(s) au dossier établi(s) par le médecin traitant

Raison de la consultation:

Diagnostic établi au dossier

☐ Gonalgie / aucun diagnostic posé

☐ Syndrome fémoro-patellaire


☐ Syndrome de la bandelette iliotibiale

☐ Arthrose au compartiment

☐ Tendinopathie

3. Confirmer les dysfonctionnements biomécaniques et les associations musculosquelettiques/explications

- Les dysfonctionnements/marqueurs biomécaniques présents dans les résultats de la genougraphie du système KneeKG® seront automatiquement sélectionnés pour vous; notez que la phase du cycle de marche dans laquelle chacun est présent est également déjà sélectionnée pour vous. De plus les explications possibles en lien avec le diagnostic établis seront également choisies pour vous. Vous pouvez consulter les courbes cinématiques pour vérifier ou ajouter des dysfonctionnements présents durant l'envoi ou ajouter des explications possibles au besoin.
- Si vous désirez générer un rapport détaillé, vous passerez en revue chaque dysfonctionnement biomécanique présent et sélectionnerez les explications et les causes potentielles appropriées liées à la pathologie de votre patient.

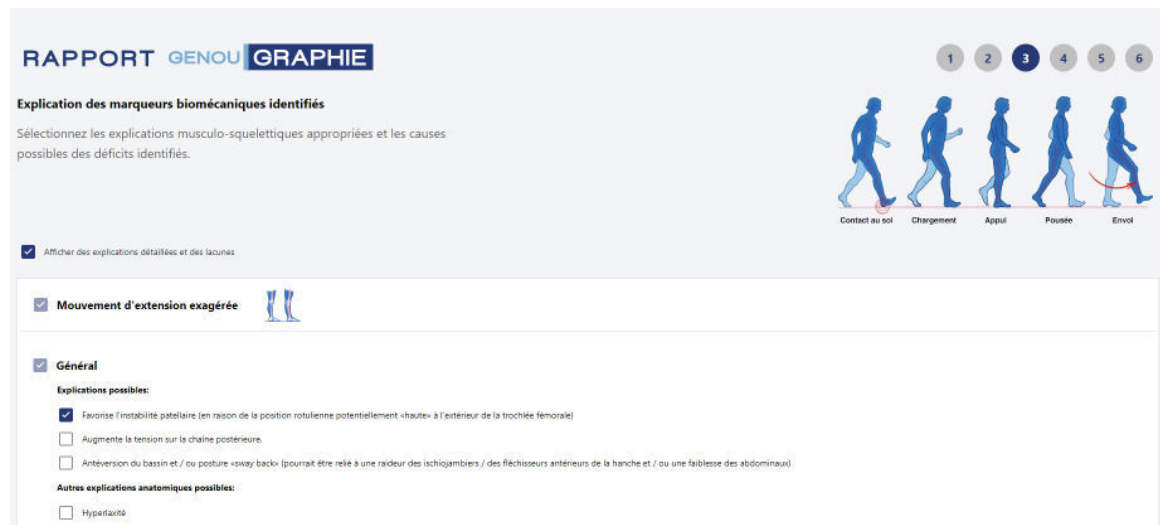

RAPPORT GENOU GRAPHIE

Explication des marqueurs biomécaniques identifiés

Sélectionnez les explications musculo-squelettiques appropriées et les causes possibles des déficits identifiés.

☒ Afficher des explications détaillées et des lacunes

☒ Mouvement d'extension exagérée

☒ Général

Explications possibles:

- ☒ Favorise l'instabilité patellaire (en raison de la position rotulienne potentiellement «haute» à l'extérieur de la trochée fémorale)
- ☐ Augmente la tension sur la chaîne postérieure
- ☐ Antéversion du bassin et / ou posture «sway back» (pourrait être relié à une raideur des ischiojambiers / des flexisseurs antérieurs de la hanche et / ou une faiblesse des abdominaux)

Autres explications anatomiques possibles:

- ☐ Hyperflectibilité

(Note: Si vous effectuez un rapport bilatéral des genoux, vous pouvez individualiser l'interprétation et les recommandations pour chacun des genoux. Soyez prudent en sélectionnant les bonnes informations pour le bon genou.)

4. Produire un résumé des impressions cliniques

- Utilisez les informations de l'étape 3 pour créer un résumé des dysfonctionnements biomécaniques et de leur lien avec la pathologie du patient ainsi que pour sélectionner des phases spécifiques de la marche qui sont davantage dysfonctionnelles et préoccupantes. Une sélection sera préalablement faite pour vous fondée sur la sélection en étape 2 (diagnostic) et les marqueurs biomécaniques sélectionnés en étape 3



RAPPORT GENOU GRAPHIE

Suite à l'identification des déficiences mécaniques, sélectionner les options les plus liées à leur impact mécanique sur l'articulation du genou.

L'expertise clinique a permis d'identifier :

- ☐ marqueurs biomécaniques révélant une dysfonction du genou
- ☐ une dynamique patellaire altérée
- ☐ une surcharge du compartiment
 - ☐ médial
 - ☐ latéral
 - ☐ antéro-postérieur
- ☐ une surcharge chronique et / ou une surutilisation du
 - ☐ mécanisme extenseur (muscle du quadriceps ainsi que les tendons quadriceps et patellaires)
 - ☐ mécanisme flexionneur


5. Formuler des suggestions d'options thérapeutiques

Avant de finaliser le rapport, vous devez sélectionner les recommandations appropriées que vous proposeriez au patient ou au clinicien responsable. Considérant toutes les informations que vous avez en votre possession, indiquez si le patient pourrait bénéficier d'un programme personnalisé d'exercices biomécaniques correctifs, d'une orthèse de genou/genouillère ou de d'autres modalités thérapeutiques qui pourraient améliorer leur qualité de vie. Ne sélectionnez pas simplement tous les biomarqueurs identifiés et toutes les recommandations potentielles. Utilisez plutôt cette étape pour établir quels marqueurs biomécaniques devraient être traités en priorité pour ce patient en utilisant votre jugement clinique et en considérant la raison de consultation de ce patient et toutes les informations cliniques pertinentes. Pour le programme d'exercices personnalisé, nous suggérons de conserver environ 3 marqueurs biomécaniques afin de limiter le nombre d'exercices et ainsi augmenter les chances d'adhésion au programme.



6. Générer un brouillon du rapport et signer/saisir votre code PIN

- Réviser le brouillon et générez la copie finale en ajoutant votre signature électronique et votre code PIN de sécurité.
- Vous pouvez dessiner votre signature ou vous pouvez choisir une signature pour vous-même.
- Vous pouvez toujours retourner dans le dossier du patient pour revoir ou modifier ce rapport.
- Une fois que vous avez signé et saisi votre code PIN, vous pouvez cliquer sur « Générer Rapport » pour générer le rapport. Le rapport sera automatiquement enregistré dans le dossier du patient pour des consultations futures. Vous serez alors redirigé vers une page où vous pourrez enregistrer/télécharger le rapport (PDF), retourner au tableau de bord (pour accéder au dossier d'un autre patient) ou retourner au tableau du patient.

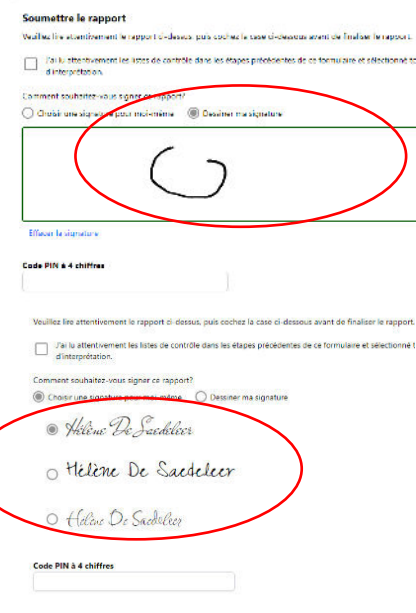


1.2.2.2. Rapport OA

Cette fonction vous permet de générer un rapport **OA** associé au patient sélectionné.



Le but de ce rapport est de démontrer la présence ou l'absence de facteurs de risque biomécaniques liés à la progression de l'arthrose du genou.

Le rapport affichera l'indication « **Positif** » ou « **Négatif** » notant si les différents marqueurs biomécaniques sont présents dans la démarche cinématique spécifique du patient.

EMOVI	
Rapport OA du KneekG®	
Date: 2022-05-04 Évaluateur KneekG: Bianca Marois	
<p>Présence de facteurs de risque biomécaniques en lien avec l'arthrose</p> <p><u>Compartment interne et compartment fémoropatélaire</u></p> <p>Augmentation du varus lors du chargement (varus thrust) ^{1,4} Négatif (2.2°)</p> <p>Alignement fonctionnel statique en varus ¹⁰ Négatif (Valgus -4.1°)</p> <p>Genou varum au contact au sol ¹⁰ Négatif (Valgus -3.8°)</p> <p>Genou varum durant l'appui ¹⁰ Négatif (Valgus -3.3°)</p> <p><u>Compartment externe et compartment fémoropatélaire</u></p> <p>Augmentation du valgus lors du chargement (valgus thrust) ¹ Négatif (0.0°)</p> <p>Alignement fonctionnel statique en valgus ^{10, 10} Positif (Valgus -4.1°)</p> <p>Genou valgum au contact au sol ^{10, 10} Positif (Valgus -3.8°)</p> <p>Genou valgum durant l'appui ^{10, 10} Positif (Valgus -3.3°)</p> <p><u>Compartment fémoropatélaire</u></p> <p>Contracture dynamique en flexion au contact au sol ¹⁵ Négatif (0.4° de flexion)</p> <p>Rotation externe tibiale au contact au sol ^{15, 18} Positif (7.9°)</p> <p><u>Général</u></p> <p>Tibia en position de rotation interne par rapport au fémur durant le chargement ^{2, 2} Négatif</p> <p>Indice de masse corporelle (IMC) > 25 ^{10, 22, 23, 24} N/A</p> <p>Présence de marqueurs biomécaniques en lien avec l'arthrose durant la marche</p> <p>Genou en extension au contact au sol ¹⁴ Positif (flexion 0.4°)</p> <p>Flexion limitée lors du chargement ^{10, 10} Positif (3.7° de flexion)</p> <p>Limitation de l'extension en appui ¹⁰ Positif (6.8° d'extension)</p> <p>Diminution de la flexion à l'envol ^{10, 10} Négatif (57.0°)</p> <p>Diminution de l'amplitude de mouvement flexion/extension ^{10, 10} Négatif (59.7°)</p> <p>voir www.emovi.ca pour la liste de référence</p>	

Sélectionnez l'acquisition désirée et sélectionnez le type de rapport « Rapport OA ».

- Une case nommée "Ajouter une comparaison" apparaît sous la bande déroulante et vous permet de générer un rapport qui compare deux analyses différentes. Si vous ne cochez pas cette case, un rapport sera généré avec seulement la première analyse que vous avez sélectionnée. Autrement, vous pouvez choisir deux analyses à comparer dans un même rapport.
- Notez que si vous générez un rapport de comparaison, vous pouvez comparer deux analyses quelconques, pour n'importe quel genou, *sauf* si les deux analyses concernent le même genou et sont de la même consultation.

Générer:

Pour:

Rapport OA

Genou gauche Marche confortable, Acquisition 1, 2021-11-17

☐ Ajouter une comparaison

Générer Rapport

#KKG	TYPE	ACQUISITION #	DATE ANALYSE	RAPPORTS
Consultation 1: 2021-11-17				
☒	Genou gauche	Marche confortable	Acquisition 1	2021-11-17

☒ Rapports en attente

1.2.2.3 Rapport des marqueurs biomécaniques (BM)

Cette fonction vous permet de générer un rapport des marqueurs biomécaniques (Biomechanical Markers Report) associé au patient sélectionné.



Le but de ce rapport est de montrer les valeurs des marqueurs biomécaniques identifiés dans la littérature comme étant liés aux atteintes du genou.

Le rapport affichera l'indication « Positif » ou « Négatif » notant si les différents marqueurs biomécaniques sont présents dans la démarche cinématique spécifique du patient.



Rapport KneeKG® des marqueurs biomécaniques	
Date: 2022-05-04 Évaluateur KneeKG: Bianca Marois	
Marqueurs biomécaniques	Résultats 2022-05-04
Compartiment interne et compartiment fémoropatélaire	
Augmentation du varus lors du chargement (varus thrust)	Négatif
Alignement fonctionnel statique en varus	Négatif (Valgus -4.1°)
Genou varum au contact au sol	Négatif (Valgus -3.8°)
Genou varum durant l'appui	Négatif (Valgus -3.3°)
Compartiment externe et compartiment fémoropatélaire	
Augmentation du valgus lors du chargement (valgus thrust)	Négatif (-0.0°)
Alignement fonctionnel statique en valgus	Positif (Valgus -4.1°)
Genou valgum au contact au sol	Positif (Valgus -3.8°)
Genou valgum durant l'appui	Positif (Valgus -3.3°)
Compartiment fémoropatélaire	
Contracture dynamique en flexion au contact au sol	Négatif (0.4° de flexion)
Rotation externe tibiale au contact au sol	Positif + (7.9°)
Général	
Genou en extension au contact au sol	Positif (flexion 0.4°)
Flexion limitée lors du chargement	Positif + (3.7° de flexion)
Limitation de l'extension en appui	Positif (6.8° d'extension)
Mouvement de rotation tibiale interne lors du chargement	Positif + (9.6°)
Tibia en position de rotation interne par rapport au fémur durant le chargement	Négatif

Sélectionnez l'acquisition désirée et sélectionnez le type de rapport « Rapport Marqueurs Biomécaniques ».

- Une case nommée "Ajouter une comparaison" apparaît sous la bande déroulante et vous permet de générer un rapport qui compare deux analyses différentes. Si vous ne cochez pas cette case, un rapport sera généré avec seulement la première analyse que vous avez sélectionnée. Autrement, vous pouvez choisir deux analyses à comparer dans un même rapport.
- Notez que si vous générez un rapport de comparaison, vous pouvez comparer deux analyses quelconques, pour n'importe quel genou, *sauf* si les deux analyses concernent le même genou et sont de la même consultation.



Générer: Rapport Marqueurs Biomécaniques Pour: Genou gauche Marche confortable, Acquisition 1, 2021-11-17

☐ Ajouter une comparaison

Générer Rapport

#KKG	TYPE	ACQUISITION #	DATE ANALYSE	RAPPORTS
Consultation 1: 2021-11-17				
☒	Genou gauche	Marche confortable	Acquisition 1	2021-11-17

Rapports en attente

1.2.2.4. Rapport de triage pour arthroplastie (TR)

Cette icône représente le rapport de triage pour arthroplastie. (Triage Arthroplasty Report (TR))



Cette fonction vous permet de générer le rapport de triage pour arthroplastie associé au patient sélectionné.

Ce rapport est un outil qui évalue la pertinence d'une consultation en chirurgie orthopédique pour une arthroplastie du genou pour un patient souffrant d'arthrose grave du genou. Cet outil, servant de support à la décision, s'applique uniquement aux patients ayant un diagnostic clinique confirmé **d'arthrose avancée du genou**. Ce rapport donnera une réponse simple « Oui » ou « Non » à la question suivante :

« Selon les caractéristiques du patient et les résultats de la genougraphie, l'outil de triage fonctionnel d'aide à la décision clinique évalue si la condition du patient est **APPROPRIÉE POUR UNE CONSULTATION EN ARTHROPLASTIE ORTHOPÉDIQUE ?** »



GENOUGRAPHIE

Nom du patient: Hélène NAME:
Date de consultation: 2022-05-04
ID du patient KneeKG: 00009

OUTIL D'AIDE À LA DÉCISION CLINIQUE POUR ORIENTER LA GESTION DES PATIENTS GONARTHROSIQUES*

Outil de triage pour soutenir la pertinence d'une consultation en chirurgie orthopédique pour une arthroplastie du genou.

Analyse effectuée pour: **Genou gauche**

Selon les caractéristiques du patient et les résultats de la genougraphie, l'outil de triage fonctionnel d'aide à la décision clinique évalue si la condition du patient est **APPROPRIÉE POUR UNE CONSULTATION EN ARTHROPLASTIE ORTHOPÉDIQUE?**

RÉSULTAT: NON

Les directives cliniques recommandent que tous les patients soient encouragés à suivre des traitements conservateurs (ex. exercices, perte de poids, etc.)^{1,2}. À cet égard, les patients pourraient bénéficier d'un programme d'exercice personnalisé à domicile pour traiter les marqueurs mécaniques, identifié par la genougraphie, lié à l'arthrose.

Une innovation proposée par: EMOVI

***Annotations:** Cet outil d'aide à la décision est destiné à être utilisé en complément par les professionnels de la santé appropriés. Les résultats ne remplacent pas le professionnel de la santé. La décision finale de renvoyer le patient pour une consultation orthopédique ou non appartient au professionnel de la santé dans les considérations systémiques du patient. Cet outil d'aide à la décision n'est applicable qu'aux patients ayant un diagnostic clinique confirmé d'arthrose du genou.

Performance de l'outil d'aide à la décision par sexe³


	Précision (AUC)	Sensibilité	Spécificité
Homme	0.94	82.7%	84.3%
Femme	0.74	74.5	73.1%

1. Janssen (US). Treatment of osteoarthritis of the knee: maximum-based guideline, 2nd edition. J Am Acad Orthop Surg. 2013 Sep;21(9):171-6.
2. Hootman (US). American College of Rheumatology 2012 recommendations for the non-pharmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee. Arthritis care & research. 2012 May;27(5):652-74.
3. Dwyer (US). Decision risk for total knee arthroplasty based on knee arthroscopy consultation based on kinematics and gender. International Society of Orthopedic Surgery and Traumatology Annual Meeting Abstract. Canada Oct. 2018

Cet outil utilise un algorithme développé par un groupe de chirurgiens orthopédiques pour fournir une réponse à cette question basée sur des données objectives. La réponse est basée sur la fonction de l'articulation du genou évaluée par la genougraphie et le sexe du patient assigné à la naissance. La précision, la sensibilité et la spécificité de l'outil de triage sont indiquées au bas du rapport pour chaque sexe.

Notez que cet outil de support à la décision est fait pour être utilisé seulement par les professionnels de la santé appropriés. Ces résultats ne remplacent pas le professionnel de la santé. La décision finale quant au fait de référer ou non un patient pour une consultation orthopédique en arthroplastie appartient toujours au professionnel de la santé dans les considérations systémiques du patient.

Ce rapport de triage pour athrosplatie ne devrait être utilisé que pour des patients souffrant d'arthrose grave du genou.

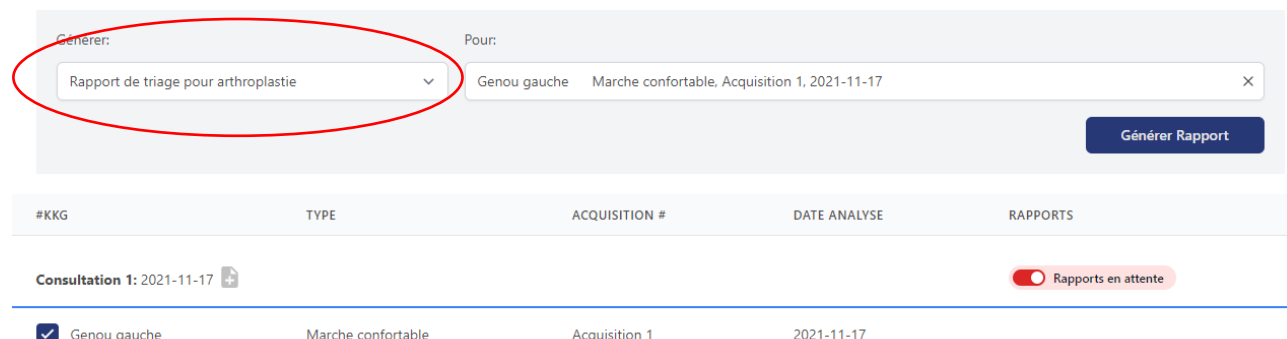

Générer: **Rapport de triage pour arthroplastie** Pour: **Genou gauche Marche confortable, Acquisition 1, 2021-11-17**

Générer Rapport

#KKG	TYPE	ACQUISITION #	DATE ANALYSE	RAPPORTS
Consultation 1: 2021-11-17				
☒	Genou gauche	Marche confortable	Acquisition 1	2021-11-17

☒ Rapports en attente

Ce rapport ne peut être généré que pour une seule analyse à la fois. Après avoir sélectionné une analyse et cliqué sur le bouton « Générer Rapport », le rapport va être tout simplement généré. (Si


vous sélectionnez plusieurs analyses, le rapport sera généré que pour la première analyse sélectionnée.)

1.2.2.5. Rapport de profil cinématique (KP)

Cette icône représente le rapport de cinématique (Kinematic Profile Report (KP)).



profil

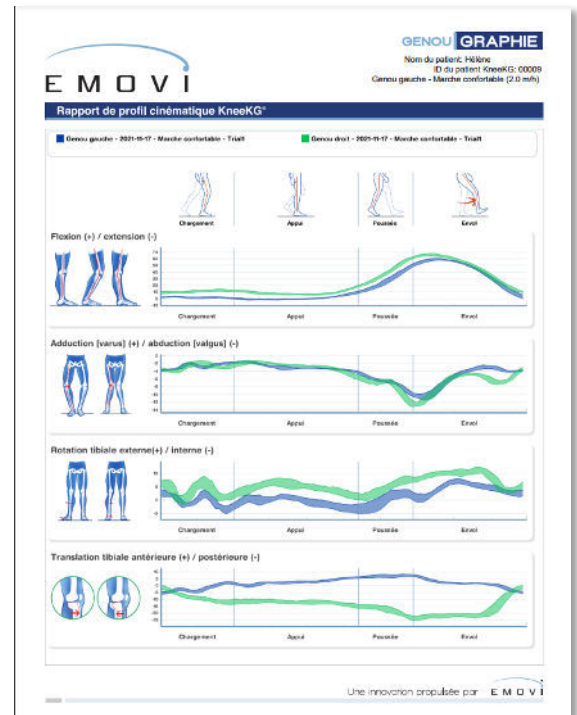

Sélectionnez l'acquisition désirée et sélectionnez le type de rapport « Rapport de profil cinématique ».

Générer:

Rapport de profil cinématique

Sans comparaison

Pour:

Genou gauche Marche confortable, Acquisition 1, 2021-11-17

Générer Rapport

#KKG	TYPE	ACQUISITION #	DATE ANALYSE	RAPPORTS
Consultation 1: 2021-11-17				
☒ Genou gauche	Marche confortable	Acquisition 1	2021-11-17	☐ Rapports en attente

1. Une deuxième bande déroulante va apparaître dans laquelle vous pouvez choisir le type de rapport de profil cinématique que vous souhaitez générer. Il existe trois types de rapports cinématiques : « Sans comparaison », « Comparaison (référence) » et « Comparaison (même patient) ». Les particularités de chaque rapport sont décrites ci-dessous :

Générer: Rapport de profil cinématique

Pour: Genou gauche Marche confortable, Acquisition 1, 2021-11-17

Sans comparaison

Sans comparaison

Comparaison (référence)

Comparaison (même patient)

Générer Rapport

#KKS	TYPE	ACQUISITION #	DATE ANALYSE	RAPPORTS
Consultation 1: 2021-11-17				
☒	Genou gauche	Marche confortable	Acquisition 1	2021-11-17


- Si vous choisissez « Sans comparaison », le rapport sera généré seulement pour une analyse. (Si vous choisissez « Sans comparaison », mais sélectionnez plusieurs analyses, seulement la première analyse sélectionnée sera utilisée.)
 - Si vous sélectionnez « Comparaison (référence) », un menu déroulant apparaît dans lequel vous pouvez choisir le type de courbe de référence prédéfinie à utiliser comme référence.
 - Si vous sélectionnez « Comparaison (même patient) », vous pouvez ensuite choisir une deuxième analyse avec laquelle faire la comparaison.
2. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Générer Rapport », l'application va afficher un aperçu du rapport. Si vous avez sélectionné « Comparaison (référence) », il vous est alors possible à cet endroit de changer la courbe de référence et de voir les différentes comparaisons possibles. Ensuite, lorsque vous cliquez sur le bouton « Générer PDF », le rapport est généré et classé dans le dossier du patient.

Dans cette section, quatre graphiques sont affichés. Ils représentent diverses cinématiques selon les différents plans anatomiques durant le cycle de marche.

Moyenne de la cinématique 3D et de la translation antéro-postérieure


- **Plan sagittal:** Le premier graphique représente la cinématique du genou en flexion/extension durant le cycle de marche.

Flexion (+) / extension (-)

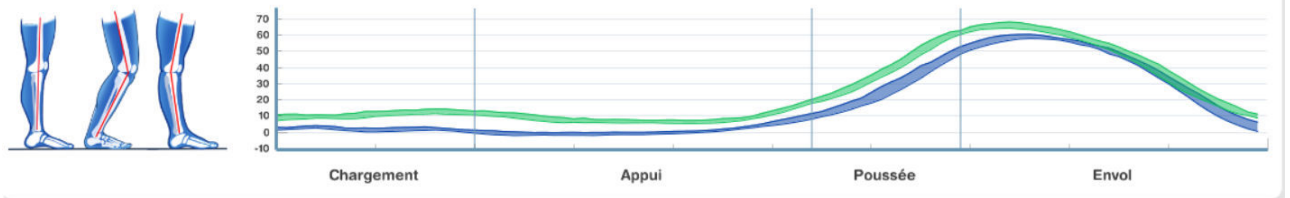


- **Plan frontal:** Le deuxième graphique représente la cinématique du genou en adduction/abduction durant le cycle de marche.

Adduction [varus] (+) / abduction [valgus] (-)

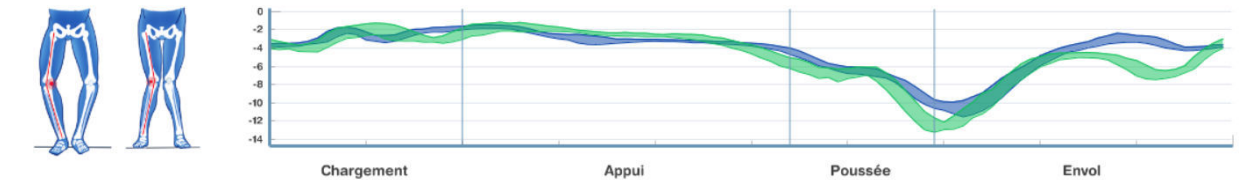


- **Plan transverse:** Le troisième graphique représente la cinématique du genou au niveau des rotations tibiales internes/externes durant le cycle de marche.

Rotation tibiale externe(+) / interne (-)

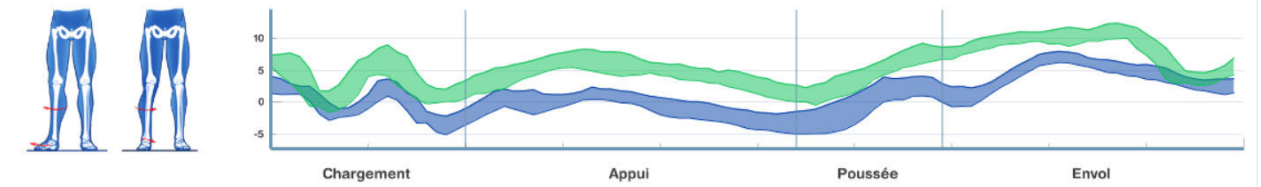

- **Translation antéro-postérieure:** Le quatrième graphique correspond à la cinématique du genou au niveau des translations antéro-postérieures durant le cycle de marche.

Translation tibiale antérieure (+) / postérieure (-)

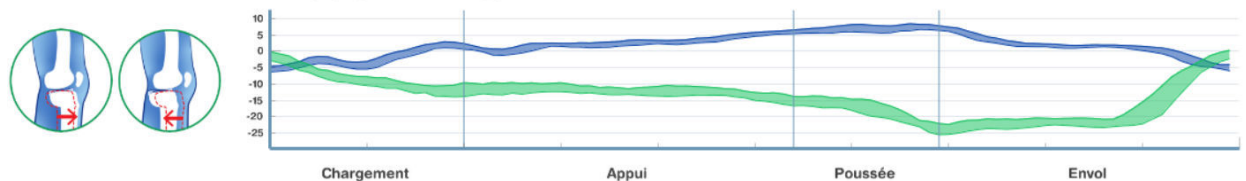


1.2.3. Rapports en attente

« Rapports en attente » est une fonctionnalité de l'application KneeKG APP+ qui permet aux cliniciens de suivre les consultations pour lesquelles un rapport de consultation doit être généré.

Par défaut, un patient ayant au moins une nouvelle consultation et analyse sera tout d'abord considéré comme ayant des rapports en attente. Ensuite, dès qu'un rapport de consultation (CR) pour une acquisition de type « Marche confortable » d'au moins une analyse par consultation est générée, le patient ne sera plus considéré comme ayant des rapports en attente.

La bascule « Rapports en attente » est rouge lorsque des rapports sont en attente et grise lorsqu'aucun rapport n'est en attente.

Le KneeKG APP+ suit automatiquement quels patients ont des rapports en attente. Cependant, vous pouvez toujours modifier manuellement le statut en cliquant sur le bouton « Rapports en attente ». Par exemple, vous pouvez indiquer qu'un autre rapport est toujours en attente pour la consultation d'un patient même si un rapport de consultation a déjà été généré. Inversement, vous pouvez décider qu'il n'est pas nécessaire pour une certaine consultation indiquée comme ayant des rapports en attente de générer ceux-ci pour qu'elle soit complète.

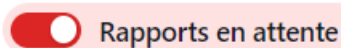


Comme décrit ci-dessus, les consultations avec des rapports en attente peuvent être répertoriées en premier pour que cela soit plus facile de voir les rapports que vous devez générer.

Note importante : Une fois que vous avez modifié le statut d'une bascule « Rapports en attente », l'application KneeKG ne mettra plus automatiquement à jour le statut de cette consultation. Par exemple, si les rapports ne sont pas en attente pour une certaine consultation selon la bascule et que vous modifiez le statut de cette dernière pour indiquer que des rapports sont en fait en attente, le KneeKG APP+ ne le modifiera pas après la génération d'un nouveau rapport de consultation. Vous devrez alors le modifier manuellement.

1.3. ONGLET « RAPPORTS ET FICHIERS » DU PATIENT

L'onglet « Rapports et fichiers » affiche une liste unique de tous les rapports générés pour les différentes acquisitions du patient, ainsi que tout autre fichier que vous ou d'autres cliniciens ayez pu télécharger dans le dossier de ce patient.

Au haut de cet onglet se trouve un filtre avec lequel vous pouvez sélectionner un type de rapport à afficher.

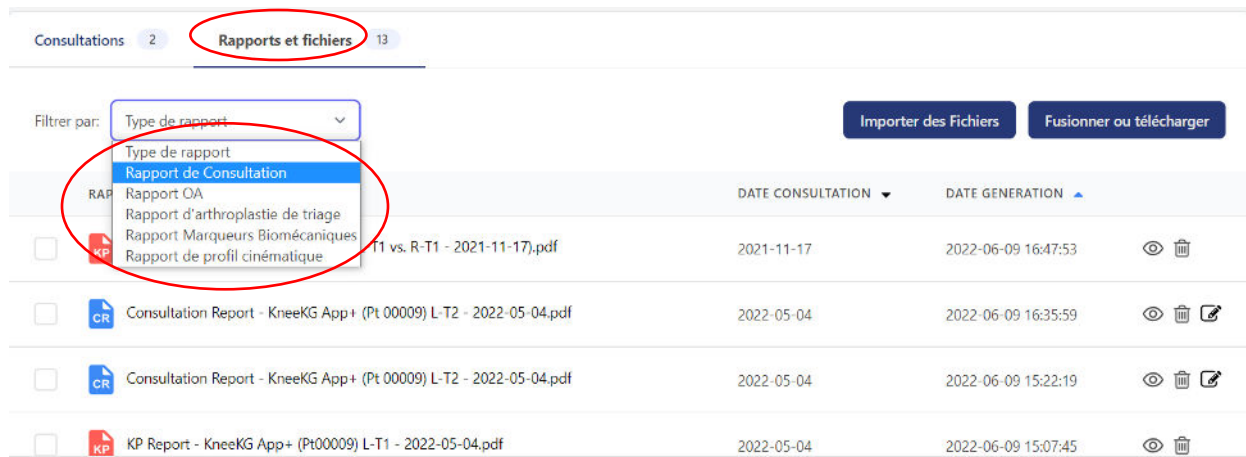

	Filter par: Type de rapport	DATE CONSULTATION	DATE GENERATION	
☐	RAP Rapport de Consultation Rapport OA Rapport d'arthroplastie de triage Rapport Marqueurs Biomécaniques Rapport de profil cinématique	T1 vs. R-T1 - 2021-11-17).pdf	2021-11-17	2022-06-09 16:47:53
☐	CR Consultation Report - KneeKG App+ (Pt 00009) L-T2 - 2022-05-04.pdf		2022-05-04	2022-06-09 16:35:59
☐	CR Consultation Report - KneeKG App+ (Pt 00009) L-T2 - 2022-05-04.pdf		2022-05-04	2022-06-09 15:22:19
☐	KP KP Report - KneeKG App+ (Pt00009) L-T1 - 2022-05-04.pdf		2022-05-04	2022-06-09 15:07:45

Affichage rapide: Pour voir le fichier dans un nouvel onglet, cliquez sur l'icône en forme d'œil à la droite.



Supprimer: Pour supprimer un fichier



Modifier: Pour modifier un rapport de consultation, cliquez sur l'icône en forme de crayon. Cela vous mènera au générateur de rapport.



1.3.1. Fusionner et télécharger des fichiers

Cette icône indique que le fichier a été créé en fusionnant plusieurs types de rapports ou de fichiers téléchargés.



Il est possible de fusionner différents types de rapports dans un seul PDF et sélectionner l'ordre dans lequel ils doivent être combinés. Un petit nombre apparaîtra à côté de la case à cocher pour confirmer l'ordre dans lequel le type de rapport sera positionné dans le document fusionné.

Lorsque vous cliquez sur le bouton « Fusionner ou télécharger », une fenêtre apparaît à partir de laquelle vous pourrez fusionner les fichiers sélectionnés en un seul PDF qui sera ajouté au dossier du patient.

Consultations 2		Rapports et fichiers 13	
Filtrer par: Type de rapport		<input type="button" value="Importer des Fichiers"/> <input type="button" value="Fusionner ou télécharger"/>	
RAPPORTS	DATE CONSULTATION	DATE GENERATION	
☐  KP Report - KneeKG App+ (Pt00009 L-T1 vs. R-T1 - 2021-11-17).pdf	2021-11-17	2022-06-09 16:47:53	 
☐  Consultation Report - KneeKG App+ (Pt 00009) L-T2 - 2022-05-04.pdf	2022-05-04	2022-06-09 16:35:59	  
☒ 1  Consultation Report - KneeKG App+ (Pt 00009) L-T2 - 2022-05-04.pdf	2022-05-04	2022-06-09 15:22:19	  
☒ 2  KP Report - KneeKG App+ (Pt00009) L-T1 - 2022-05-04.pdf	2022-05-04	2022-06-09 15:07:45	 
☒ 3  BM Report - KneeKG App+ (Pt00009) L-T1 - 2022-05-04.pdf	2022-05-04	2022-06-09 15:07:20	 
☒ 4  OA Report - KneeKG App+ (Pt00009) L-T1 - 2022-05-04.pdf	2022-05-04	2022-06-09 15:06:58	 

Vous pouvez également télécharger ce fichier fusionné sur votre ordinateur. Les fichiers sont fusionnés dans l'ordre que vous les avez sélectionnés. Vous pouvez changer le nom par défaut du fichier avant de l'enregistrer.

Fusionner ou télécharger

×

Fichiers sélectionnés:

1. Consultation Report - KneeKG App+ (Pt 00009) L-T2 - 2022-05-04.pdf
2. KP Report - KneeKG App+ (Pt00009) L-T1 - 2022-05-04.pdf
3. BM Report - KneeKG App+ (Pt00009) L-T1 - 2022-05-04.pdf
4. OA Report - KneeKG App+ (Pt00009) L-T1 - 2022-05-04.pdf

Ces fichiers vont être fusionnés dans l'unique fichier PDF nommé:

.pdf

☒ Télécharger le fichier PDF fusionné sur mon ordinateur

Sauvegarder

1.3.2. Importer des fichiers

Cette icône indique que l'utilisateur a importé ce fichier.



En haut à droite de la page « Rapports et fichiers » se trouve un bouton pour accéder à la fonction « Importer des fichiers ». Cette fonction vous permet de télécharger tous les fichiers PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF ou TIF qui sont pertinents au dossier du patient. La taille de fichier maximale permise est de 2 MB. Vous pouvez associer le fichier téléchargé à un genou précis et à une consultation spécifique.

Importer des Fichiers



Fichier sélectionné:

Aucun fichier choisi

Genou:

- ☐ Aucun / S/O
- ☐ Genou gauche
- ☐ Genou droit
- ☐ Bilatéral

Consultation:


Sélectionner



2 PARAMÈTRES DE L'UTILISATEUR

2.1 Modifier/Mettre à jour vos informations

Sur votre portail KneeKG APP+, vous pouvez accéder à vos paramètres d'utilisateur en cliquant sur votre nom dans le coin supérieur droit.

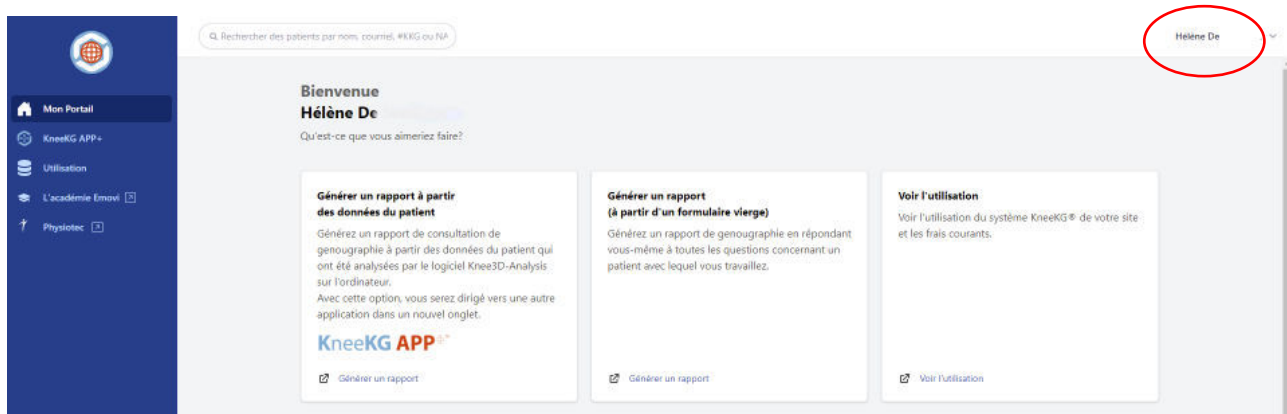

Ensuite, en cliquant sur « Mon profil », vous pourrez procéder aux modifications voulues. Cette page vous permet de modifier l'adresse courriel associée à votre compte sur le portail KneeKG APP+, votre code PIN, votre mot de passe et d'autres informations personnelles. Vous pouvez également définir votre langue de préférence (anglais ou français).

2.2 Changer de mot de passe

Cette page vous permet de changer le mot de passe associé à votre compte sur le portail Client Emovei et ainsi également le mot de passe du logiciel Knee3D Clinical-Info pour utiliser le système KneeKG ®.

Ce nouveau mot de passe doit être saisi deux fois, soit dans les champs « Nouveau mot de passe » et « Confirmer un nouveau mot de passe ». Les deux mots de passe saisis doivent être identiques. De plus, le nouveau mot de passe doit respecter les règles de sécurité suivantes :

- Au moins une lettre minuscule
- Au moins une lettre majuscule.
- Au moins un caractère spécial (par exemple: ! @ \$ & * % ?)
- Au moins 8 caractères

De plus, le système peut également restreindre l'utilisation des mots de passe précédemment utilisés.

Lorsque ces restrictions ne sont pas respectées, l'application ne changera PAS le mot de passe et retournera au formulaire en vous informant du problème.